




The future of vision

CANABRAVA RING

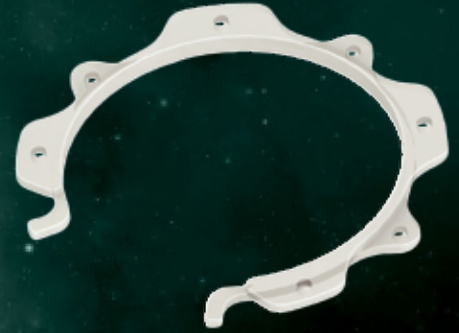

CANABRAVA RING

Кільце – розширювач зіниці

Марка	CANABRAVA RING
Позначення	CANA-RING
Опис та показання	<p>Кільце-розширювач зіниці для безпечного розширення зіниці та спрощення факоемульсифікації, а також операцій, під час яких зіниця не розширюється належним чином при використанні лікарських засобів. Кільце-розширювач забезпечує отвір зіниці на 6,3 мм та підтримує стабільне розширення під час операції, покращуючи для хірурга доступ та поле зору.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Однокомпонентне напівкругле кільце 300° з отвором 60°. • Не потребує інжектора. • Легке в імплантації та видаленні. • Кільце може бути імплантоване в розріз до 2 мм. • Легко імплантується в зіниці з діаметром меншим за 4,5 мм та в неглибокі камери. • Оптимальна видимість. • Одноразовий пристрій, який не підлягає повторній стерилізації. <p><i>Показання</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Міоз. • Колобома. • Травматична секторна іридектомія. • Інтраопераційний синдром гнучкої райдужної оболонки. • Пролапс райдужної оболонки. • Маленькі зіниці. • Тверді тканини райдужної оболонки внаслідок псевдовідшарування. • Вітректомія при малих зіницях.
Матеріал	Поліметилметакрилат (PMMA) медичного призначення.
Метод стерилізації	Оксид етилену (ЕТО).
Пакування	Стерильна індивідуальна упаковка.
Термін зберігання	4,5 роки від дати виробництва.

REV: 01_06/2019
220218UA