



The future of vision


## ESNOOPER CLIP



# ESNOOPER CLIP

## Імпланта́т для лікува́ння глаукоми

Марка	ESNOOPER CLIP
Позначення	VCLIP-AJL
Опис та показання	<p>ESNOOPER CLIP — це увеосклеральний імплантат, що не розсмоктується, який складається з двох пластин та забезпечує два канали дренажу: трабекулярний (інтрасклеральний і супрациліарний) та увеосклеральний для полегшення дренажу внутрішньоочної рідини.</p> <p>ESNOOPER CLIP призначений для непроникаючої глибокої склеректомії (НПГС / NPDS) в хірургії відкритокутової глаукоми. Задля імплантації, пластину з насічками слід вставити у супрахорідальний простір, а верхня пластина має розміститися на склеральному дні. Поперечні насічки забезпечують ідеальну фіксацію імплантату без допомоги швів та запобігають його зміщенню.</p>
Розміри	5,50 мм × 1,30 мм × 2,20 мм.
Отвори	3 (дренаж).
Матеріал	Гідроксietилметакрилат (HEMA).
Метод стерилізації	Стерилізація паром.
Пакування	ESNOOPER CLIP постачається в індивідуальному стерильному флаконі розміщеним на підставці з фіксатором, яка занурена в добре очищену воду для підтримки належного зволоження.
Термін зберігання	3 роки від дати виробництва.
* Продукт з маркуванням CE	

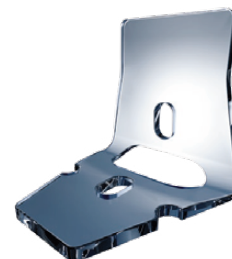

### Хірургічні інструменти для НПГС (рекомендовані)

Марка	KIT EPNP	Код виробу	AJL- KIT-001
Призначення	Набір для НПГС (непроникаючої глибокої склеректомії).		
Опис	<p>Набір для НПГС постачається нестерильним в жорсткій пластиковій упаковці та містить такі інструменти:*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EPNP-2001 — розширювач Liebermann 14 мм.</li> <li>• EPNP-2002 — подвійний склеральний маркер.</li> <li>• EPNP-2003 — шпатель Mermoud.</li> <li>• EPNP-2004 — затискач Mermoud.</li> <li>• EPNP-2005 — зігнуті мікроножиці.</li> <li>• PST-4600A — коробка для стерилізації (10 × 16 × 2 см).</li> </ul>		
* Інструменти можуть постачатися як комплект (набір для НПГС / NPDS Kit) або окремо.			



200310UA REV: 04.04/2019