

ATE-660 та ATE-860

Новий дизайн



 **TOPCON** Healthcare

ATE-660 та ATE-860

Торсон ATE-660 та ATE-860 — найновіші моделі офтальмологічних інструментальних столів від Торсон. Дизайн цих столів був суттєво оновлений з акцентом на якість, довговічність та зручність. Ці столи повністю задовільняють всі Ваші потреби в зручності використання щілинних ламп, рефрактометрів, ОКТ, тонометрів та інших приладів.



УПРАВЛІННЯ КАБЕЛЯМИ

Обидва столи постачаються з інтегрованими кабелями живлення та мережевими з'єднаннями для зручного та легкого використання. Підключення кабелів живлення та мережі вбудовані в основу стола.



МОБІЛЬНІСТЬ

Столи ATE-660 та ATE-860 оснащені гладкими міцними коліщатами з фіксацією.



БАЗА ДЛЯ КОЛІСНОГО КРИСЛА

Обидві моделі мають варіант постачання з базою без коліщаток для полегшення доступу пацієнтів на колісних кріслах.

	ATE-660	ATE-860
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА СТІЛЬНИЦЮ	40 кг	40 кг
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ТРИМАЧ ДЛЯ ПК	-	10 кг
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА СТІЛЬНИЦЮ З ОДИН ПРИБАДОМ	20 кг	-
МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА СТІЛЬНИЦЮ З ДВОМА ПРИБАДАМИ	40 кг	-
МАКСИМАЛЬНИЙ ХІД ПО ВИСОТІ	325 мм	325 мм
МІНІМАЛЬНА ВИСОТА СТОЛУ, МОДЕЛЬ З КОЛІЩАТКАМИ	670 мм	670 мм
МІНІМАЛЬНА ВИСОТА СТОЛУ З БАЗОЮ ДЛЯ КОЛІСНОГО КРИСЛА	640 мм	640 мм
ВАГА НЕТТО	30 кг	50 кг
ВАГА БРУТТО	50 кг	80 кг
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	110-240В	110-240В
ЕЛЕКТРИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ	Клас I, тип Б	Клас I, тип Б

ATE-660


Стіл ATE-660 є найновішим доповненням до лінійки столів Торсон для офтальмологічних приладів. Дизайн стола кардинально оновлено для покращення якості, довговічності та зручності. На додаток до високоякісних міцних коліщаток, стіл оснащено інтегрованими кабелями живлення та мережевими підключеннями для зручності та простоти використання. ATE-660 також має опцію стаціонарної бази (без коліщаток) для полегшення доступу пацієнтів на колісних кріслах. Опора може бути розташована як по центру, так і з одного з боків. Кнопка керування з м'якою підсвіткою для умов слабкого освітлення дозволяє регулювати висоту стільниці на 300 мм. Стіл ATE-660 має три різні варіанти стільниці: одинарна, подвійна та V-подібна. Також можна обрати положення опори: по центру або з одного з боків.




1 Стільниця ATE-660 одинарна
630×420 [мм] для одного приладу



2 Стільниця ATE-660 подвійна
840×420 [мм] для двох приладів

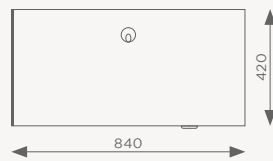


3 Стільниця ATE-660 V-подібна
1136×566 [мм] для двох приладів

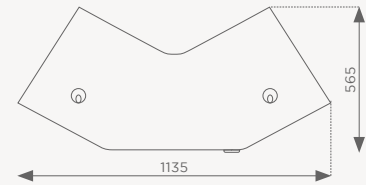

ATE-860

Дизайн стола ATE-860 кардинально оновлено для покращення якості, довговічності та зручності. На додаток до високоякісних міцних коліщаток, стіл оснащено інтегрованими кабелями живлення та мережевими підключеннями для зручності та простоти використання. ATE-860 також має опцію стаціонарної бази (без коліщаток) для полегшення доступу пацієнтів на колісних кріслах. Кнопка керування з м'якою підсвіткою для умов слабкого освітлення дозволяє регулювати висоту стільниці на 300 мм. Стіл ATE-860 має додаткову полицю для ПК та кронштейн для кріплення монітора, щоб разом з приладами можна було встановити робочу станцію з ПК.

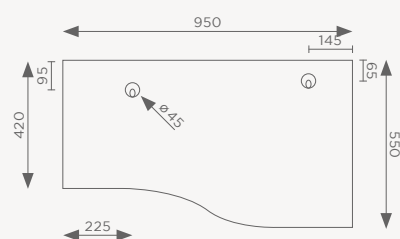

Стільниця ATE-860

Настільний блок ATE-860 має панель управління опорою стола. Внутрішня сторона стільниці містить різні кріплення та вставки для кріплення ПК та меблів Synthesis, опори для підборіддя та блока живлення щілинної лампи.

Розміри стільниці ATE-860 становлять приблизно 950×550 мм, а панель управління можна встановити праворуч або ліворуч від користувача.



Дізнайтеся
більше!

ВАЖЛИВО

Щоб отримати найкращі результати з цими інструментами, будь ласка, перегляньте всі призначені для користувача інструкції перед початком роботи.

Продукти, послуги та пропозиції можуть бути доступні не на всіх ринках, а також можуть відрізнятися в різних країнах. За інформацією про особливості та наявність продуктів в конкретній країні звертайтеся до дистриб'ютора.

Інформація в цій публікації призначена виключно для медичних працівників. Зареєстровано в Україні.

©2024 Корпорація Topcon | M000099E-1 | Продукт відповідає Регламенту ЄС 2017/745 про медичні вироби | UA20250205

Виробник  **ANCAR**

Antoni Carles, S.A.
Carrer de la Volta dels Garrofers 41-42
08340 Vilassar de Mar Spain



TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel
P.O. Box 145, 2900 AC Capelle a/d IJssel
THE NETHERLANDS
Phone: +31-(0)10-4585077
Fax: +31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON DANMARK
Praestemarksvej 25, 4000 Roskilde
DANMARK
Phone: +45-46-327500
Fax: +45-46-327555
E-mail: info.todk@topcon.com
www.topconhealthcare.eu/dk_DK

TOPCON SCANDINAVIA
Neongatan 2, P.O.Box 25, 43151 Mölndal
SWEDEN
Phone: +46-(0)31-7109200
Fax: +46-(0)31-7109249
E-mail: info.hcs.se@topcon.com
www.topconhealthcare.eu/sv_SE

TOPCON ESPAÑA
Oficina Principal en España
Frederic Mompou, 4,
08960 Sant Just Desvern, Barcelona, SPAIN
Phone: +34-93-4734057
Fax: +34-93-4733932
E-mail: medica@topcon.com
www.topconhealthcare.eu/es_ES

TOPCON ITALY
Viale dell' Industria 60,
20037 Paderno Dugnano, (MI) ITALY
Phone: +39-02-9186671
Fax: +39-02-91081091
E-mail: info_tit@topcon.com
www.topconhealthcare.eu/it_IT

TOPCON FRANCE MEDICAL
1 rue des Vergers, Parc Swen,
Bâtiment 2, 69760 Limonest, FRANCE
Phone: +33-(0)4-37 58 19 40
Fax: +33-(0)4-72 23 86 60
E-mail: topconfrance@topcon.com
www.topconhealthcare.eu/fr_FR

TOPCON DEUTSCHLAND MEDICAL
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41,
D-47877 Willich, GERMANY
Phone: (+49)2154-885-0
Fax: (+49)2154-885-177
E-mail: info@topcon-medical.de
www.topconhealthcare.eu/de_DE

TOPCON POLSKA SP. Z O. O.
ul. Warszawska 23, 42-470 Siewierz
POLAND
Phone: +48-(0)32-670-50-45
Fax: +48-(0)32-671-34-05
E-mail: info.pl@topcon.com
www.topconhealthcare.eu/pl_PL

TOPCON GREAT BRITAIN MEDICAL
Topcon House, Kennet Side, Bone Lane,
Newbury, Berkshire RG14 5PX
UNITED KINGDOM
Phone: +44-(0)1635-551120
Fax: +44-(0)1635-551170
E-mail: medical.tgbm@topcon.com
www.topconhealthcare.eu/en_UK

TOPCON IRELAND MEDICAL
Unit 292, Block G, Blanchardstown,
Corporate Park 2 Ballycoolin
Dublin 15, D15 DX58, IRELAND
Phone: +353-12233280
E-mail: medical.ie@topcon.com
www.topconhealthcare.eu/en_IE



МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДИКУС»
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВИРОБНИКА В УКРАЇНІ,
ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР ТА ДИСТРИБ'ЮТОР
вул. Краківська, 22, Київ 02094 УКРАЇНА
Тел.: +380 44 574 0571, факс: +380 44 574 0573
E-mail: eye@medicus.ua • medicus.ua/topcon

